

BEDIENUNGSANLEITUNG

- KIND*connectLine ConnectClip*



Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Bedienung und Pflege Ihres neuen ConnectClip. Bitte machen Sie sich mit dem gesamten Inhalt dieser Anleitung vertraut, insbesondere mit dem Abschnitt **Warnhinweise**.

So stellen Sie sicher, dass Sie das volle Potenzial Ihres neuen ConnectClip nutzen können. Wenn Sie weitere Fragen zur Verwendung von ConnectClip haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

Bitte nutzen Sie die untere Menüleiste, um schnell und bequem zu den einzelnen Abschnitten zu gelangen.

| **Über** | Inbetriebnahme | Funktionen | Warnhinweise | Mehr Info |

Indikationen für den Einsatz

Indikationen für den Einsatz	ConnectClip ist ein kabelloser Hörer und Sender von Klängen zwischen kabellosen Hörsystemen und der Umgebung, einschließlich Gesprochenem und kabellosen elektronischen Audiogeräten. ConnectClip hilft dem Hörsystemnutzer des Weiteren bei der Steuerung der Funktionalität seines Hörsystems.
Indikationen für die Verwendung	Keine Angaben zur Verwendung.
Vorgesehene Nutzer	Erwachsene und Kinder älter als 36 Monate.
Anwendungsumgebung	Drinne und draußen
Kontraindikationen	Benutzer von aktiven Implantaten müssen bei der Verwendung des Geräts besonders aufmerksam sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Warnhinweise“.
Klinische Vorteile	Siehe klinische Vorteile des Hörsystems.

Inhaltsverzeichnis

Über

Ihr Einstieg	6
Übersicht über ConnectClip – Hauptfunktionen	8
Anzeigeübersicht	10

Inbetriebnahme

Koppeln der Hörsysteme mit ConnectClip	12
Koppeln des Mobiltelefons mit ConnectClip	14
Ein- und Ausschalten von ConnectClip	16
Laden von ConnectClip	18

Funktionen

Nutzen von ConnectClip mit einem Mobiltelefon	20
Hören von Musik	26
Nutzen von ConnectClip mit einem externen Mikrofon	28
Nutzen von ConnectClip als Fernbedienung für Hörsysteme	33
Weitere Eigenschaften und Funktionen	34

Warnhinweise

Warnhinweise	36
--------------	----


Zusätzliche Informationen

Nutzungsbedingungen	40
Internationale Garantie	41
Technische Daten	42

Ihr Einstieg


Bevor Sie ConnectClip mit Ihren Hörsystemen nutzen können, müssen die Hörsysteme mit ConnectClip gekoppelt (verbunden) werden. Die Nutzung von ConnectClip mit einem Mobiltelefon erfordert auch, dass ConnectClip mit Ihrem Mobiltelefon gekoppelt wird.

Koppeln der Hörsysteme mit ConnectClip

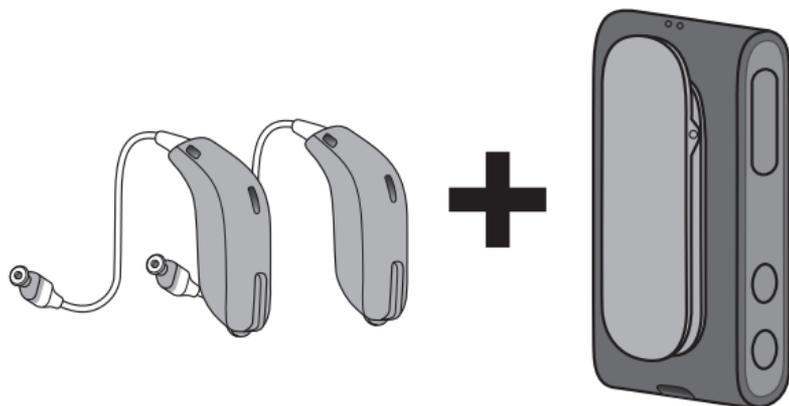


Siehe Seite
14

Koppeln des Mobiltelefons mit ConnectClip

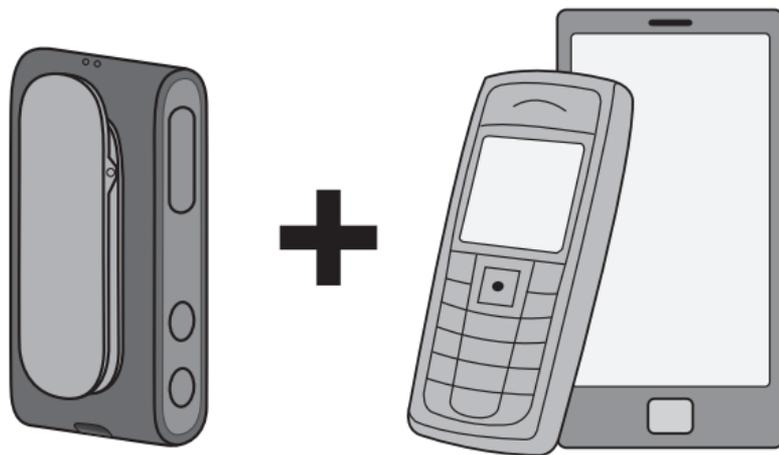


Siehe Seite
16

Übersicht über ConnectClip – Hauptfunktionen

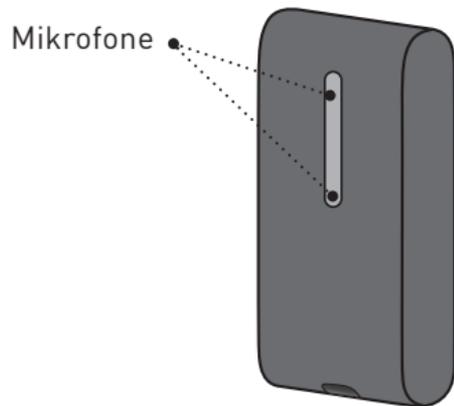

Vorderseite

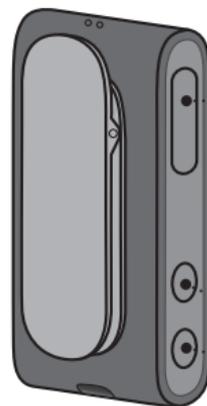

• **Multitaster**


- EIN/AUS
- Anrufe beantworten
- Modus auswählen

• **Lautstärketaster**

- Lauter
- Leiser


Rückseite

Status-
anzeige • Power-
Anzeige

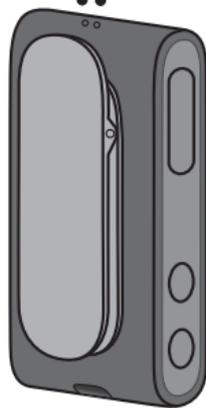

• Ladebuchse
(Micro-USB)

Clip für
die Kleidung
ConnectClip

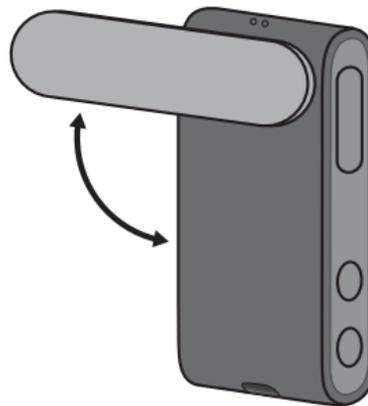

Anzeigeübersicht


LED-Statusanzeige	Modus
Gelb blinkend	Suche nach Hörsystemen
Durchgängig gelb	Inaktiv. Hörsysteme verbunden. Mit keinem Mobiltelefon verbunden.
Blau blinkend	Suche nach einem Mobiltelefon (Kopplung)
Durchgängig blau	Mit einem Mobiltelefon verbunden
Durchgängig grün	In einem Anruf. Headset oder Mobiltelefon.
Grün blinkend	Eingehender Anruf
Durchgängig orange	Musik-Streaming vom Telefon/Gerät
Durchgängig magenta	Modus des externen Mikrofons

Power-Anzeige	Modus
Durchgängig rot	Akku schwach
Durchgängig grün	Eingeschaltet – kein Laden
Grün blinkend	Eingeschaltet – Laden erfolgt
Schwaches Grün	Eingeschaltet – Laden abgeschlossen
Orange blinkend	Ausgeschaltet – Laden erfolgt
Durchgängig orange	Ausgeschaltet – Laden abgeschlossen
Kein Licht	Ausschalten

Koppeln der Hörsysteme mit ConnectClip

1. Stellen Sie sicher, dass ConnectClip ausgeschaltet ist.

Drücken und halten Sie den Multitaster für etwa 6 Sekunden, bis die **Power-Anzeige AUS** ist.

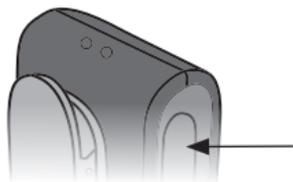

2. Aktivieren Sie den Kopplungsmodus der Hörsysteme.

Starten Sie die Hörsysteme neu, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. In der Bedienungsanleitung der Hörsysteme finden Sie Informationen zum Ein- und Ausschalten der Hörsysteme.


3. Die Hörsysteme sind bereit

für die Verbindung mit ConnectClip.


Sie haben 3 Minuten, um die Kopplung abzuschließen.

4. Schalten Sie ConnectClip ein.

Drücken und halten Sie den Multitaster für etwa 3 Sekunden, bis die Power-Anzeige **DURCHGÄNGIG GRÜN leuchtet**.

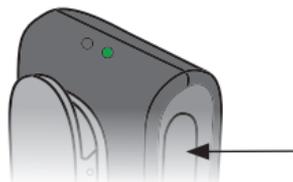


- 5. ConnectClip sucht nach Ihren Hörsystemen.**
Die Statusanzeige BLINKT GELB.

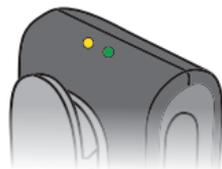

- 6. Platzieren Sie ConnectClip und beide Hörsysteme nahe nebeneinander**
(max. Abstand von 20 cm).




20 cm

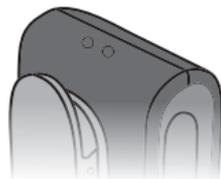

- 7. Die Verbindung mit den Hörsystemen wurde hergestellt.** Die Statusanzeige leuchtet DURCHGÄNGIG GELB.



Koppeln des Mobiltelefons mit ConnectClip

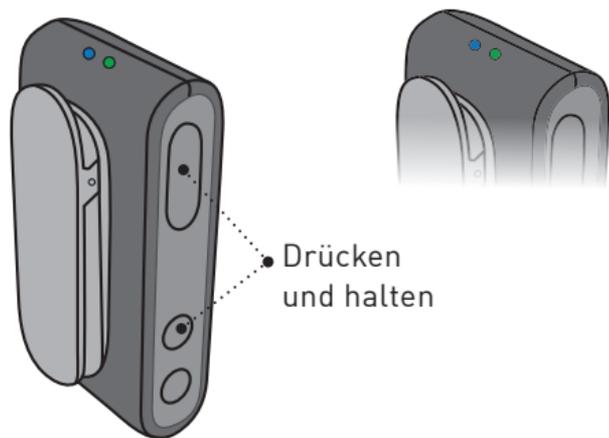


Drücken
und halten

Aktivieren Sie den Kopplungsmodus von ConnectClip.

Drücken und halten Sie den Multitaster UND den Lautstärketaster „Lauter“ gleichzeitig für etwa 6 Sekunden, bis die Statusanzeige BLAU BLINKT.

ConnectClip befindet sich für etwa 3 Minuten im Kopplungsmodus.

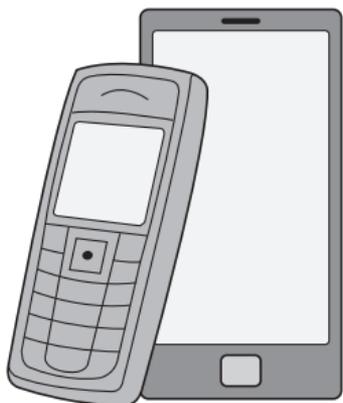

Aktivieren Sie den Kopplungsmodus des Mobiltelefons.

Aktivieren Sie Bluetooth. Suchen Sie nach ConnectClip und koppeln Sie.

Die Option befindet sich in den Einstellungen im Bluetooth-Abschnitt Ihres Telefons.

Geben Sie die PIN ein.

Falls Ihr Telefon eine PIN erfordert, geben Sie 0000 (vier Nullen) ein.



Die Kopplung ist abgeschlossen.


Die Kopplung mit dem Mobiltelefon ist abgeschlossen. Die Statusanzeige leuchtet DURCHGÄNGIG BLAU.

Ein- und Ausschalten von ConnectClip



EIN

Drücken und halten Sie den Multitaster für etwa 3 Sekunden, bis die Power-Anzeige DURCHGÄNGIG grün leuchtet.

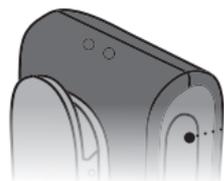

AUS

Drücken und halten Sie den Multitaster für etwa 6 Sekunden, bis die Power-Anzeige AUS ist.

Nutzung	Batterieleistung
Typischer täglicher Gebrauch	16 Stunden: Bis zu 2 Stunden Musik-Streaming + 2 Stunden telefonieren + 12 Stunden Standby
Standby (eingeschaltet, kein Streaming)	Bis zu 36 Stunden
Musik und externes Mikrofon	Bis zu 5 Stunden
Telefonanrufe	Bis zu 6 Stunden

WICHTIGER HINWEIS

Reinigen Sie ConnectClip mit einem weichen, feuchten Tuch. Er darf keinesfalls gewaschen oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Tragen Sie ConnectClip nicht unter der Dusche oder beim Wassersport. Tauchen Sie ConnectClip nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Laden von ConnectClip




- **Akku schwach**

Mit etwa 30 Minuten verbleibender Streaming-Zeit. Die Power-Anzeige wechselt zu DURCHGÄNGIG ROT.



- **Laden**

Verbinden Sie das beiliegende Ladegerät mit dem Micro-USB-Anschluss unten am ConnectClip. Die Power-Anzeige BLINKT GRÜN oder ORANGE.

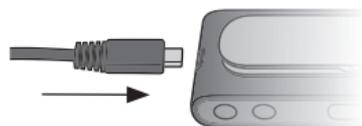

WICHTIGER HINWEIS

Verwenden Sie zum Laden von ConnectClip das mitgelieferte Originalnetzteil mit 5,0 V/1 A, CE-Kennzeichnung und Sicherheitszeichen.



Power-Anzeige	Modus
Grün blinkend	Eingeschaltet – Laden erfolgt
Schwaches Grün	Eingeschaltet – Laden abgeschlossen
Orange blinkend	Ausgeschaltet – Laden erfolgt
Durchgängig orange	Ausgeschaltet – Laden abgeschlossen


Ladezeit:

2 Stunden für einen vollständigen Ladevorgang über das mitgelieferte Netzteil

WICHTIGER HINWEIS

Während des Ladens sollte die Ladeanzeige leuchten, wie in dieser Anleitung beschrieben. Wenn die Ladeanzeige nicht wie beschrieben leuchtet, trennen Sie das Gerät vom Ladegerät und wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.

Nutzen von ConnectClip mit einem Mobiltelefon

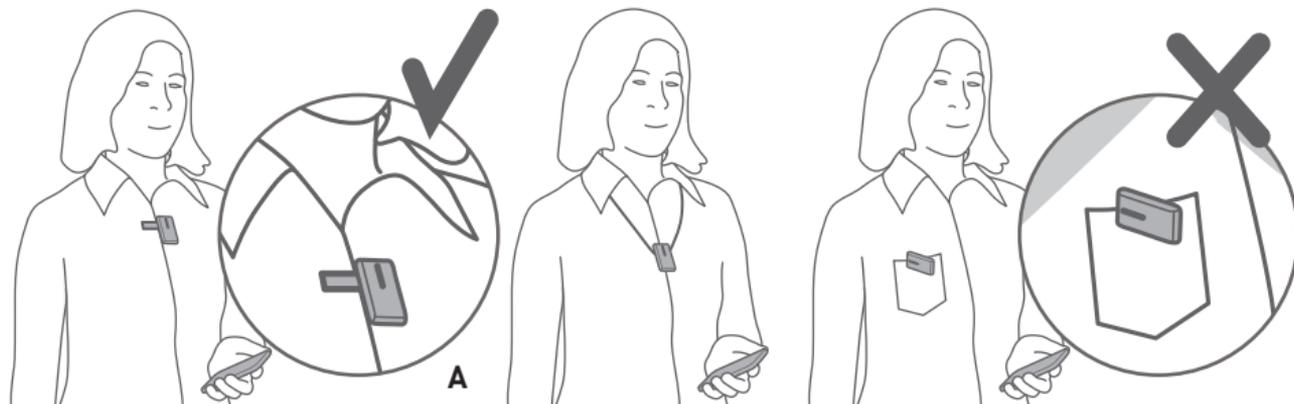

ConnectClip sollte für die bestmögliche Leistung wie angegeben getragen werden. Es ist wichtig, dass das Mikrofon zu Ihrem Mund zeigt (A). Stellen Sie sicher, dass ConnectClip nicht durch Kleidung usw. verdeckt ist. Der maximale Abstand zwischen ConnectClip und dem Mobiltelefon beträgt 10 Meter.

Sicherstellen, dass ConnectClip mit dem Telefon verbunden ist




Wählen Sie den Telefonmodus. Drücken und halten Sie den Multitaster für etwa 3 Sekunden, um den Modus zu wechseln. Der Moduswechsel wird durch einen Signalton Ihrer Hörsysteme bestätigt. Die Statusanzeige leuchtet DURCHGÄNGIG BLAU.



Statusanzeige	Modus
Durchgängig gelb	Leerlauf. Hörsysteme verbunden, mit keinem Telefon verbunden
Durchgängig blau	Mit einem Mobiltelefon verbunden
Durchgängig magenta	Modus des externen Mikrofons

Beantworten von Anrufen

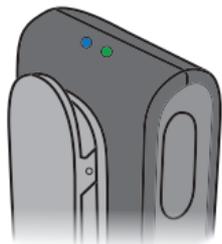

Telefon verbunden

Wenn ConnectClip eingeschaltet und in Reichweite Ihres Mobiltelefons ist, verbindet er sich automatisch mit dem Telefon.

Die Statusanzeige leuchtet DURCHGÄNGIG BLAU.



Telefon klingelt

Wenn das Telefon klingelt, hören Sie einen Signalton und den Klingelton Ihres Telefons (falls verfügbar) in Ihren Hörsystemen.

Die Statusanzeige leuchtet DURCHGÄNGIG GRÜN.





- **Anruf beantworten**

Drücken Sie entweder kurz den Multitaster oder nehmen Sie den Anruf über Ihr Mobiltelefon an.

Sobald der Anruf verbunden ist, leuchtet die Statusanzeige DURCHGÄNGIG GRÜN.




- **Anruf beenden**

Drücken Sie entweder kurz den Multitaster oder beenden Sie den Anruf über Ihr Mobiltelefon.

Die Statusanzeige leuchtet DURCHGÄNGIG BLAU.

Anrufe tätigen

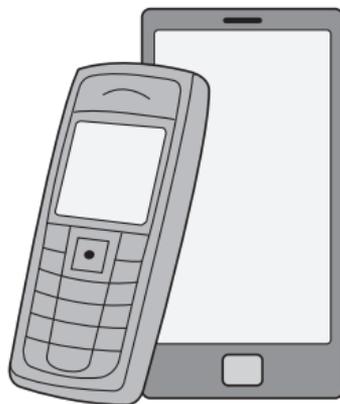

Um einen Anruf zu tätigen, müssen Sie nur das Mobiltelefon nutzen. Der Anruf wird automatisch mit ConnectClip verbunden.

Sobald der Anruf verbunden ist, leuchtet die Statusanzeige DURCHGÄNGIG GRÜN.

Erweiterte Headset-Funktionen

Sprachsteuerung / Sprachbefehle

Wenn Sie bei einer bestehenden Kopplung mit dem Mobiltelefon den Multitaster doppelt drücken, wird die Sprachsteuerung aktiviert, sollte diese vom Telefon unterstützt werden.

Anruf ablehnen

Durch langes Drücken auf den Lautstärketaster „Leiser“, während das Telefon klingelt, wird der Anruf abgelehnt.

Hörsysteme stummschalten

Halten Sie den Lautstärketaster „Leiser“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Hörsysteme stumm zu schalten.

Durch ein kurzes Drücken der Lautstärketaster „Lauter“ oder „Leiser“ wird die Stummschaltung der Hörsysteme beendet.

Hören von Musik



Kabelloses Audio

Wenn eine Bluetooth-Verbindung mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät besteht, wird die auf dem Telefon/ Gerät wiedergegebene Musik automatisch auf Ihren Hörsystemen wiedergegeben.

Die Statusanzeige leuchtet DURCHGÄNGIG ORANGE.

Sie müssen am ConnectClip nichts betätigen.


Statusanzeige	Modus
Durchgängig orange	Musik-Streaming vom Telefon/Gerät

Lautstärke regeln


Beim Musikhören kann der Pegel des gestreamten Signals mithilfe der Lautstärketaster angepasst werden.

Klänge vom Telefon stoppen

Durch kurzes Drücken des Multitasters wird die Klangwiedergabe beendet. Nutzen Sie die Steuerelemente am Telefon, um die Wiedergabe zu starten.

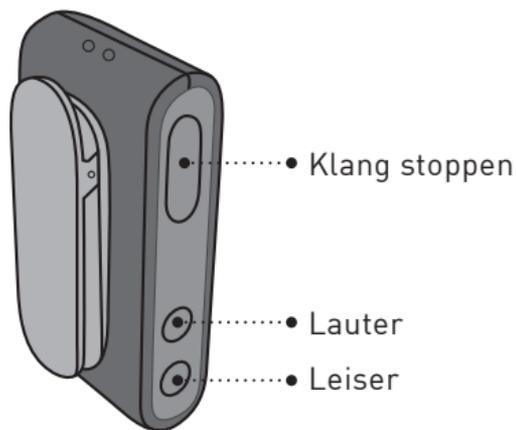


Nutzen von ConnectClip mit einem externen Mikrofon

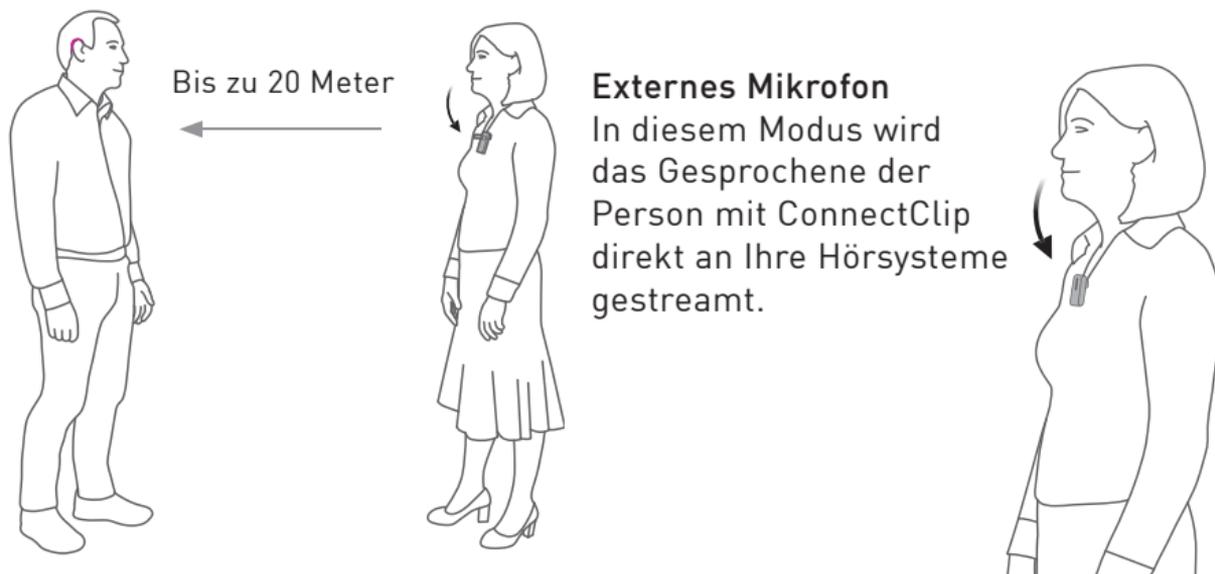

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon zum Mund des Sprechers zeigt und nicht durch Kleidung usw. abgedeckt wird.

Auswählen des Mikrofonmodus

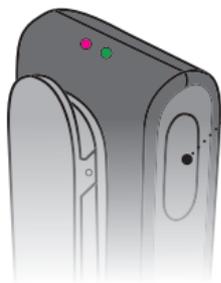

- **Mikrofonmodus auswählen**


Drücken und halten Sie den Multitaster für etwa 3 Sekunden, um den Modus zu wechseln.

Der Moduswechsel wird durch einen Signalton Ihrer Hörsysteme bestätigt. Die Statusanzeige leuchtet **DURCHGÄNGIG MAGENTA**.



Statusanzeige	Modus
Durchgängig gelb	Leerlauf. Hörsysteme verbunden, mit keinem Telefon verbunden
Durchgängig blau	Mit einem Mobiltelefon verbunden
Durchgängig magenta	Modus des externen Mikrofons

Starten/Stoppen des Klangs vom externen Mikrofon

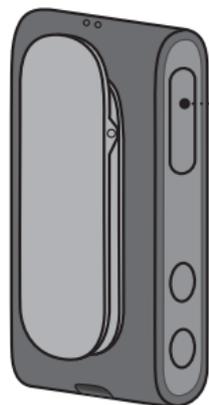

• Drücken
und halten

Klang vom Mikrofon stoppen

Drücken und halten Sie den Multitaster für etwa 3 Sekunden, um das Signal vom Mikrofon zu den Hörsystemen zu stoppen. Dadurch wechseln die Hörsysteme auch in das Normalprogramm zurück.

Die Statusanzeige leuchtet DURCHGÄNGIG GELB oder DURCHGÄNGIG BLAU.

Anpassen der Lautstärke des externen Mikrofons


Lautstärke lauter oder leiser

Das gestreamte Signal kann mithilfe der Lautstärketaster angepasst werden.

Hörsystemmikrofone stummschalten (nur Klänge vom externen Mikrofon)

Halten Sie den Lautstärketaster „Leiser“ 3 Sekunden lang gedrückt.

Durch ein kurzes Drücken des Lautstärketasters „Lauter“ oder „Leiser“ wird die Stummschaltung der Hörsysteme beendet.

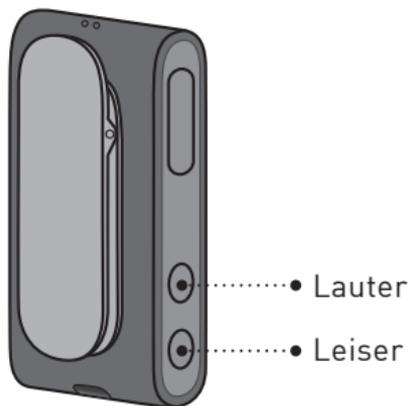

Starten/Stoppen des Klangs vom externen Mikrofon mithilfe der Hörsysteme



P1 --> P2 --> TV --> **Mikrofon**

Durch Drücken des Hörsystemtasters wechselt das Programm des Hörsystems.

Sobald Sie das Programm des externen Mikrofons erreicht haben, hören Sie den Programmsignalton des externen Mikrofons.


Wechseln Sie das Hörsystemprogramm, um den Klang des externen Mikrofons zu stoppen.

WICHTIGER HINWEIS

Ausführliche Hinweise zum Funktionsumfang Ihrer Hörsysteme finden Sie in ihrer Bedienungsanleitung.

Nutzen von ConnectClip als Fernbedienung für Hörsysteme

Wenn ConnectClip keinen Klang streamt, wird er zu einer Fernbedienung für Ihre Hörsysteme.

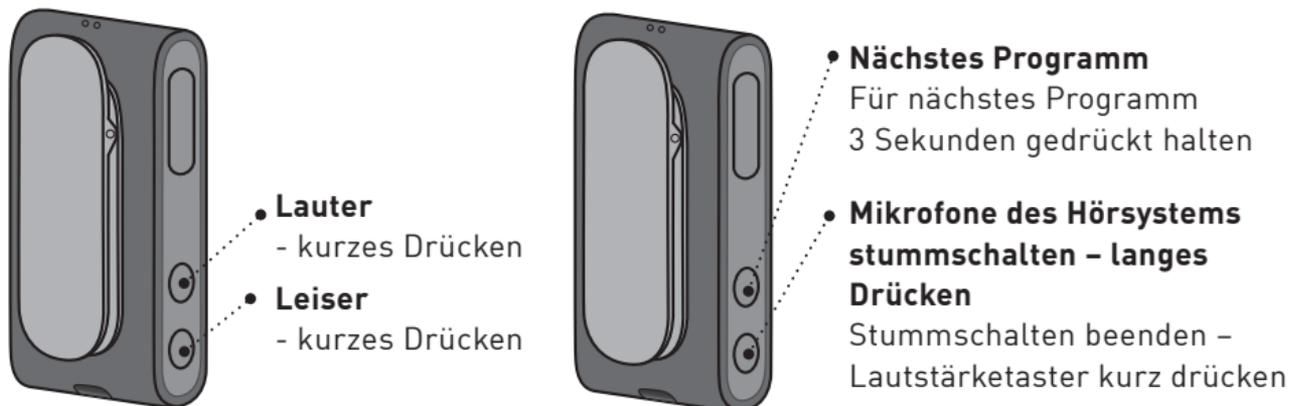

Hinweis: Der maximale Abstand zwischen ConnectClip und Hörsystemen beträgt 2 Meter.

Weitere Eigenschaften und Funktionen

Jeweils eine Verbindung

Wenn ConnectClip mit mehreren Geräten gekoppelt ist (bis zu acht), verbindet er sich nur mit dem ersten verfügbaren Telefon.

Keine Anrufe bei Nutzung als Mikrofon

Wenn ConnectClip als externes Mikrofon genutzt wird, besteht keine Verbindung zum Mobiltelefon.

Außer Reichweite im Mikrofonmodus

Wenn sich ConnectClip außerhalb der Reichweite der Hörsysteme befindet, kehren diese nach 90 Sekunden zum Normalprogramm zurück.

Bluetooth-Kopplungen löschen

Drücken und halten Sie den Multitaster oder den Lautstärketaster „Lauter“ bzw. „Leiser“ für 10 Sekunden gedrückt, um alle Bluetooth-Kopplungen zu löschen. Die Statusanzeige BLINKT ROT.

Warnhinweise

Um Ihre Sicherheit und eine korrekte Verwendung zu gewährleisten, sollten Sie sich vor der Verwendung von ConnectClip umfassend mit den folgenden allgemeinen Warnhinweisen vertraut machen. Wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker, wenn ConnectClip während der Verwendung nicht erwartungsgemäß funktioniert oder aufgrund der Verwendung schwerwiegende Zwischenfälle auftreten. Ihr Hörakustiker kann Sie bei Störungen unterstützen und diese an den Hersteller und/oder nationale Behörden melden, sofern erforderlich.

Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen

ConnectClip und dessen kleinteiliges Zubehör müssen außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen aufbewahrt werden, die Teile verschlucken oder sich auf andere Weise damit verletzen können. Bei Verschlucken von Kleinteilen ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

Explosionsgefährdung

Die Nutzung von ConnectClip unter normalen Betriebsbedingungen ist sicher. ConnectClip wurde jedoch nicht auf Einhaltung internationaler Standards in explosionsgefährdeten Umgebungen getestet. Verwenden Sie ConnectClip daher nicht in explosionsgefährdeten Bereichen wie z. B. Bergwerken, sauerstoffreichen Umgebungen oder in Bereichen, in denen brennbare Anästhesiemittel verwendet werden.

Röntgen-/CT-/MR-/PET-Untersuchung, Elektrotherapie bzw. chirurgischer Eingriff

Entfernen Sie ConnectClip bei einer Röntgen-/CT-/MR-/PET-Untersuchung bzw. bei einer Elektrotherapie oder einem chirurgischen Eingriff, da ConnectClip in Folge der dabei auftretenden starken Magnetfelder beschädigt werden könnte.

Hitze und Chemikalien

Setzen Sie ConnectClip keiner übermäßigen Hitze aus, etwa in einem in der Sonne geparkten Auto. ConnectClip darf keinesfalls in der Mikrowelle oder anderen Öfen getrocknet werden.

Die Chemikalien in Kosmetik, Haarspray, Parfum, Rasierwasser, Sonnencreme und Insektensprays können ConnectClip beschädigen. Legen Sie vor der Anwendung solcher Produkte ConnectClip stets weit weg und verwenden Sie ihn erst wieder, nachdem diese Produkte getrocknet sind.

Interferenzen

ConnectClip wurde nach den strengsten internationalen Standards getestet, um das Auftreten funktechnischer Störungen zu vermeiden. Es können jedoch Interferenzen mit ConnectClip und anderen Geräten auftreten (z. B. mit Mobiltelefonen, CB-Funkgeräten, Alarmsystemen in Kaufhäusern und anderen Kabellosgeräten). Vergrößern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen ConnectClip und der Störquelle.

Nutzung im Straßenverkehr

Die Verwendung von ConnectClip kann Sie ablenken. Achten Sie bei der Verwendung von ConnectClip auf Ihre Umgebung. Befolgen Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften bezüglich der Nutzung von Kommunikationsgeräten im Straßenverkehr.

Gebrauch im Flugzeug

ConnectClip enthält Bluetooth. ConnectClip darf nicht an Bord von Flugzeugen genutzt werden, es sei denn, dies wird vom Flugpersonal ausdrücklich erlaubt.

Aktive Implantate

ConnectClip wurde gründlich getestet und gemäß den internationalen Standards für die Exposition des Menschen (Spezifische Absorptionsrate – SAR), der induzierten elektromagnetischen Energie und Spannungen im menschlichen Körper als unschädlich für die menschliche Gesundheit befunden.

Die Expositionswerte liegen weit unter den international anerkannten Sicherheitsgrenzwerten für SAR, induzierte elektromagnetische Energie und Spannungen im menschlichen Körper, die in den Normen für die menschliche Gesundheit bei Koexistenz mit aktiven medizinischen Implantaten wie Herzschrittmachern und Herzdefibrillatoren definiert sind.

Warnhinweise

Wiederaufladbarer Akku

Öffnen Sie ConnectClip nicht. Dies kann den Akku beschädigen.

Versuchen Sie keinesfalls, den Akku selbst zu wechseln. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, falls ein Akkuwechsel erforderlich ist. Die Garantie erlischt, wenn Anzeichen von Fremdeinwirkung zu erkennen sind.

Die Sicherheit beim Laden des Akkus über das USB-Kabel wird durch die externe Signalquelle bestimmt. Bei Verbindung des Geräts mit einem netzbetriebenen externen Gerät muss dieses Gerät die Standards IEC 62368-1 oder vergleichbare Sicherheitsnormen erfüllen.

Verbindung mit externen Geräten

Der sichere Gebrauch von ConnectClip bei Verbindung mit einem externen Gerät (über AUX-Eingangskabel, USB-Kabel oder direkten Anschluss) wird durch die externe Signalquelle bestimmt.

Bei Verbindung des Geräts mit einem netzbetriebenen externen Gerät muss

dieses Gerät die Standards IEC 62368-1 oder vergleichbare Sicherheitsnormen erfüllen.

Vermeidung von Fehlbedienung

Halten Sie ConnectClip zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Vermeidung von unsachgemäßem Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern oder anderer Personen.

Nutzung von Drittanbieterzubehör

Verwenden Sie nur Zubehör, Umwandler oder Kabel, die vom Hersteller geliefert wurden. Inkompatibles Zubehör kann die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Ihres Geräts verringern.

Verwendung der Kordel

Sollte die Kordel beim Tragen plötzlich irgendwo hängen bleiben, ist sie so konstruiert, dass sie sich automatisch löst. Die Kordel darf daher keinesfalls gekürzt oder unbefugt verändert werden. Die Kordel darf nicht von Kindern unter 36 Monaten verwendet werden.

Mögliche Nebenwirkungen

Das zur Herstellung von ConnectClip verwendete, nachweislich nicht allergene Material kann in seltenen Fällen zu Hautirritationen oder anderen Nebenwirkungen führen. Sollten diese Nebenwirkungen auftreten, konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Laden

Laden Sie ConnectClip alle 6 Monate auf, um während der Lagerung mögliche Schäden an der Batterie zu vermeiden.

Handy Kompatibilität

Unter www.oticon.global finden Sie eine Liste der Mobiltelefone, die umfassend durch Oticon getestet wurden und dabei die minimalen Kompatibilitätsanforderungen erfüllt haben. Oticon übernimmt jedoch keine Verantwortung für eine Kompatibilität. Insbesondere übernimmt Oticon keine Verantwortung für eine Inkompatibilität aufgrund von zukünftigen Aktualisierungen von Mobiltelefonen noch für andere Inkompatibilitätsfälle, die nicht nur Tests belegt und/oder ermittelt wurden. Oticon übernimmt keine finanzielle Verantwortung im Hinblick auf die Erstattung von Mobiltelefonen, die nicht wie erwartet funktionieren.

Vor dem Kauf eines neuen Mobiltelefons wird Ihnen geraten, die oben genannte Liste zu konsultieren.

Nutzungsbedingungen

Betriebsbedingungen	Temperatur: +5 bis 40°C Luftfeuchte: 15–93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Luftdruck: 700 bis 1060 hPa
Transport- und Lagerbedingungen	Temperatur und Luftfeuchte sollten die nachstehenden Grenzwerte über einen längeren Zeitraum bei Transport und Lagerung nicht überschreiten. Temperatur: -20 bis +60 °C Luftfeuchte: 15–93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Luftdruck: 700 bis 1060 hPa

Internationale Garantie

Ihr Gerät verfügt über eine auf 12 Monate befristete internationale Garantie auf Material und Ausführung, beginnend ab dem Zeitpunkt der an Sie erfolgenden Lieferung. Diese eingeschränkte Garantie bezieht sich nur auf Herstellungs- und Materialfehler des Geräts, nicht jedoch auf Zubehör wie Batterien, Kabel, Netzteile usw. Probleme, die durch falsche/unsachgemäße Handhabung oder Pflege, übermäßigen Gebrauch, Unfälle, Reparaturen durch Unbefugte, Verwendung unter hoher Korrosionsbelastung, Eindringen von Fremdkörpern oder fehlerhafte Einstellungen entstehen, sind durch die eingeschränkte Garantie NICHT abgedeckt oder können zu deren Verlust führen. Im Rahmen dieser Garantie wird der Hersteller nach eigenem Ermessen entscheiden, ob das Gerät repariert oder durch ein entsprechendes Modell ersetzt wird. Die genannte Garantie berührt nicht die gesetzlichen Rechte, die

Sie möglicherweise nach den geltenden nationalen Rechtsvorschriften für den Verkauf von Konsumgütern haben. Ihr Hörakustiker hat möglicherweise eine Garantie ausgestellt, die über die Bestimmungen dieser beschränkten Garantie hinausgeht. Bitte konsultieren Sie ihn für weitere Informationen.

Service

Wenden Sie sich bei Fragen, Problemen oder Wünschen am besten an Ihren Hörakustiker. Dieser kann viele technische Schwierigkeiten sofort beheben oder einen autorisierten Reparaturbetrieb einschalten. Ihr Hörakustiker kann Ihnen behilflich sein, wenn Sie die Garantieleistung des Herstellers in Anspruch nehmen möchten. Für seine Dienstleistungen kann Ihr Hörakustiker eine Gebühr verlangen.

Technische Daten

Modell	AC1A
GTIN	05714464006809

ConnectClip enthält einen Funkempfänger mit Bluetooth Low Energy (BLE) und eine eigens entwickelte Kurzstrecken-Funktechnologie, die beide im 2,4-GHz-ISM-Band arbeiten. Die GHz-Funksender sind schwach und immer unter 50 mW, was einem Wert von 17 dBm Gesamtstrahlungsleistung entspricht. ConnectClip erfüllt die internationalen Normen bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Belastung des Menschen durch elektromagnetische Funkwellen.

Aufgrund der geringen Baugröße von ConnectClip sind alle für die Zulassung notwendigen Kennzeichnungen in dieser Broschüre abgedruckt.

Für den Betrieb am Körper erfüllt dieses Gerät die durch FCC und IC empfohlenen Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung und wurde bei Körperkontakt getestet. Das Gerät darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern platziert oder genutzt werden.

Zusätzliche Informationen finden Sie im Datenblatt.

Für die USA und Kanada

Das Gerät enthält ein Funkmodul mit den folgenden Zertifizierungsnummern:

FCC ID: 2ACAHAC01
IC: 11936A-AC01

Das Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Normen und RSS der kanadischen Industrie.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät erzeugt keine gesundheitsgefährdenden Interferenzen.
2. Dieses Gerät muss auch unter Einfluss von unerwünschten Frequenzen funktionieren.

Hinweis

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Instanz zur Einhaltung der Vorschriften genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

Der Hersteller erklärt hiermit, dass ConnectClip die wesentlichen Anforderungen und sonstigen zutreffenden Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG erfüllt.

Dieses medizinische Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2017/745 für medizinische Geräte.

Die Konformitätserklärung erhalten Sie beim Hersteller.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dänemark

CE



Bitte beachten Sie die lokalen Bestimmungen zur Entsorgung elektronischer Geräte.



Complies with
IMDA Standards
DA103820



Beschreibung der in dieser Broschüre verwendeten Symbole und Abkürzungen



Warnhinweise

Text, der mit einem Warnsymbol gekennzeichnet ist, muss vor der Verwendung des Geräts gelesen werden.



Hersteller

Das Gerät wird vom Hersteller hergestellt, dessen Name und Anschrift neben dem Symbol angegeben sind. Gibt, wie in den EU-Richtlinien 2017/745 und 2017/746 gefordert, den Hersteller des Medizinprodukts an.



CE-Zeichen

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen EU-Bestimmungen und -Richtlinien.



Elektronikschrott (WEEE)

Recyceln Sie Hörsysteme, Zubehör oder Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen. Benutzer von Hörsystemen können Elektronikschrott auch zur Entsorgung an ihren Hörakustiker zurückgeben. Elektronische Geräte, die unter die Richtlinie 2012/19 / EU über Abfälle und elektrische Geräte (WEEE) fallen.



Regulatorisches Prüfzeichen (RCM)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen für elektrische Sicherheit, EMV und Funkfrequenzen für Geräte, die an den australischen oder neuseeländischen Markt geliefert werden.



Bluetooth-Logo

Eingetragenes Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc., wo jede Nutzung eine Lizenz erfordert.



Doppelisolierung

Das Netzteil ist doppelt isoliert. Dies bedeutet ein sehr geringes Risiko von einzelnen Ausfällen.



Verwendung in Innenräumen

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

Beschreibung der in dieser Broschüre verwendeten Symbole und Abkürzungen

GTIN

Global Trade Item Number

Produktnummer mit 14 Stellen, mit der Medizingeräte einschließlich Software für Medizingeräte weltweit eindeutig identifiziert werden können. Die GTIN in dieser Anleitung bezieht sich auf die Firmware des Medizingeräts. Die GTIN auf dem Verpackungsetikett bezieht sich auf die Hardware des Medizingeräts.

Complies with
IMDA Standards
DA103820

Singapur IMDA-Etikette

Das Gerät erfüllt die von der Info-Communications Media Development Authority (IMDA) veröffentlichten Standards und Spezifikationen, ist mit den öffentlichen Telekommunikationsnetzen in Singapur kompatibel und verursacht keine Funkfrequenzstörungen in anderen zugelassenen Funknetzen.

Beschreibung der zusätzlichen Symbole auf den Etiketten



Medizinisches Gerät

Das Gerät ist ein Medizinprodukt.



Trocken lagern

Weist auf ein Medizinprodukt hin, das vor Feuchtigkeit geschützt werden muss.



Katalognummer

Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann.



Seriennummer

Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes Medizinprodukt identifiziert werden kann.



Symbol für Batterierecycling

Symbol für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien

5.0V 200mA

Stromversorgung

Gibt die Stromfrequenz an, mit der die Stromzufuhr vom Stromnetz (Steckdose) zu Ihrem Gerät erfolgt.



Südafrika ICASA-Etikett

Für das Gerät gilt eine Lizenz für den Verkauf in Südafrika.



Japan TELEC-Symbol

Zeichen für zertifizierte Funkgeräte



Brasilianisches ANATEL-Label

Das Gerät ist in Brasilien zertifiziert und genehmigt.



UDI - Unique device identifier

Zeigt dem Nutzer die eindeutige Geräteinformation an.

Deutschland:

KIND Hörgeräte
Kokenhorststraße 3-5
30938 Großburgwedel/Hannover
Tel. 0800 / 5 54 63 44
Fax 0 51 39 / 80 85-299
E-Mail: info@kind.com

Schweiz:

KIND Hörzentralen
Hertensteinstrasse 8
6004 Luzern
Tel. 0 41 41 / 8 70 70
Fax 0 41 41 / 8 70 71
E-Mail: info.ch@kind.com

Österreich:

KIND Hörgeräte
Herrengasse 6-8
1010 Wien
Tel. 01 / 5 33 98 21
Fax 01 / 5 33 31 00
E-Mail: info.at@kind.com

Ihr KIND Fachgeschäft

www.kind.com



0000220098000001

KIND